

# Nocospray

Najprostsza dezynfekcja



**SZYBKA DEZYNFEKCYJA  
POMIESZCZEŃ**

# Nocospray

Automatyczna dezynfekcja powierzchni i powietrza

Dezynfekcja powierzchni i powietrza za pomocą dyfuzji **suchej i niewidocznej mgły** opartej na 6% nadtlenu wodoru i kationach srebra (**NOCOLYSE**) generowaną przez podręczny dyfuzor (**NOCOSPRAY**)


## CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA NOCOSPRAY:

- Technologia suchej mgły o wielkości 5 mikronów
  - Komputerowa kontrola dezynfekcji za pomocą czytnika USB\*
  - Zapis daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji\*
  - Bardzo szybka dyfuzja środka w całym pomieszczeniu (6 min dla 100 m<sup>3</sup>) i możliwość użytkowania już po 30 minutach
  - Kompatybilny ze sprzętem elektronicznym w środku pomieszczenia
  - Dezynfekuje całe pomieszczenie wraz ze sprzętem
  - Bardzo łatwy w użyciu
  - Małe wymiary urządzenia, waga tylko 5,8kg
- \* Dotyczy Nocospray USB

## CHARAKTERYSTYKA DEZYNFEKANTU NOCOLYSE:

- Skład: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Ag+
- Biodegradowalny w 99,9%
- Nietoksyczny
- Niekorozyjny
- Aktywność: bakteriobójcza, wirusobójcza, grzybobójcza i sporobójcza
- Nocolyse nie posiada formaldehydu, amoniaku oraz chloru co czyni go bezpiecznym dla użytkownika
- Bardzo niskie zużycie środka dezynfekcyjnego (1 ml/m<sup>3</sup>)
- Nie pozostawia osadu
- Możliwość sprawdzenia penetracji środka – **NOCOTEST\*\***

**Minimalne Ryzyko Infekcji** - osiągnięte jest po kilku dniach regularnego stosowania i utrzymanie poprzez codzienne używanie **Nocospray'a**

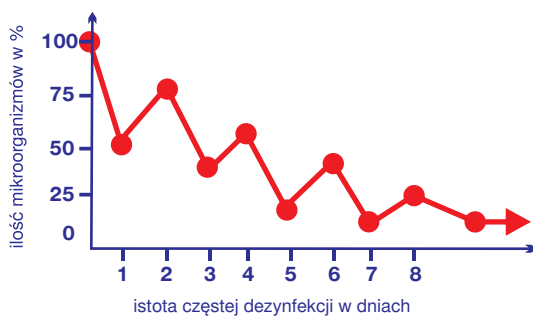

## DOSTĘPNE ŚRODKI:

### NOCOLYSE NEUTRAL / MINT

- środek dezynfekujący bezzapachowy / o zapachu miętowym

### NOCOLYSE ONE SHOT

- środek dezynfekujący o podwójnym działaniu

### NOCODOR

- środek dezynfekujący likwidujący nieprzyjemne, intensywne zapachy

### NOCOLYSE FOOD

- środek dezynfekujący przeznaczony do powierzchni mających kontakt z żywnością

### OXYDOR

- środek dezodorujący

## MODEL NOCOSPRAY BIEDRONKA:

urządzenie w specjalnej obudowie przeznaczonej na oddziały dziecięce



## MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

- ambulanse
- bloki operacyjne
- oddziały intensywnej terapii
- oddziały zakaźne
- oddziały neonatologiczne
- sale chorych
- gabinety lekarskie
- gabinety weterynaryjne
- laboratoria
- szkoły, przedszkola
- hotele
- szatnie
- zakłady karne
- sprzęt elektroniczny
- systemy klimatyzacyjne



## DOSTĘPNE WERSJE:



Nocospray - standardowa wersja urządzenia bez czytnika USB.

- Nocospray USB - wersja urządzenia z możliwością komputerowego zapisu danych
- Nocospray z timerem - możliwość ustawienia godziny startu



Nocomax - urządzenie do dezynfekcji dużych pomieszczeń o kubaturze nawet do 20 000 m<sup>3</sup>.

- Wbudowany port do komunikacji z komputerem, co umożliwia archiwizację parametrów
- Łatwy w obsłudze wyświetlacz informujący m.in. o ilości środka dezynfekcyjnego
- Możliwość programowania czasu

**\*\*NOCOTEST** – testy wskaźnikowe zmieniające kolor w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym



## WYNIKI

**AKTYWNOŚĆ ŚRODKA: BAKTERIOBÓJCZA, WIRUSOBÓJCZA, GRZYBÓBÓJCZA I SPOROBÓJCZA**

**Dostępne liczne badania: IN VITRO oraz IN VIVO**

Legionella pneumophila  
Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus aureus  
MRSA Staphylococcus aureus  
Aspergillus Niger  
Bacillus subtilis var. Niger spores  
Mycobacterium smegmatis

Clostridium Difficile  
**H5N1**  
Orthopoxvirus  
Adenovirus V  
Rhinovirus Influenza  
Norovirus  
Polio I

ver:0.1 20-05-2010r