

DSC8000

przechowuj, susz i chroń endoskopy
dla bezpieczeństwa pacjenta




Soluscope

DSC8000



wysoki poziom

Bezpieczeństwa

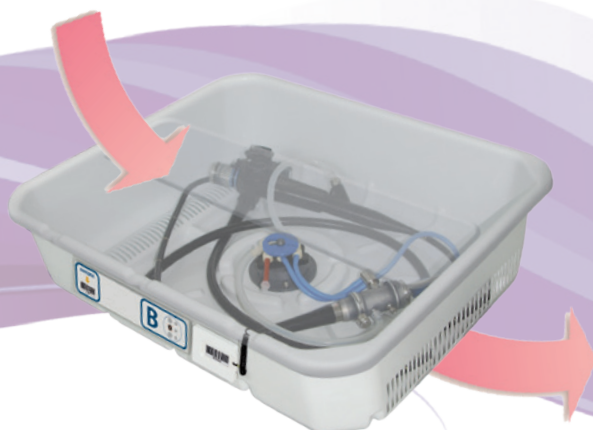

Unikalny system zapewniający ochronę i bezpieczeństwo Twojego endoskopu

INDYWIDUALNE WSTRZAŚOODPORNE TACE

Każdy endoskop jest bezpiecznie przechowywany w specjalnie zaprojektowanej tacy z pokrywą. Jej profil zapewnia cyrkulację powietrza i wydajne suszenie. Pozwala to uniknąć bezpośredniego kontaktu z endoskopem, co eliminuje ryzyko skażenia krzyżowego i środowiskowego.


BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIOLOGICZNE ENDOSKOPÓW

Wszystkie kanały płukane są powietrzem filtrowanym metodą HEPA, a bezpieczeństwo każdego endoskopu zapewnia bakteriobójcza lampa UV-C umieszczona na każdej półce.

Spełnia NORMĘ PN EN 16442 *

zwiększona

Produktywność

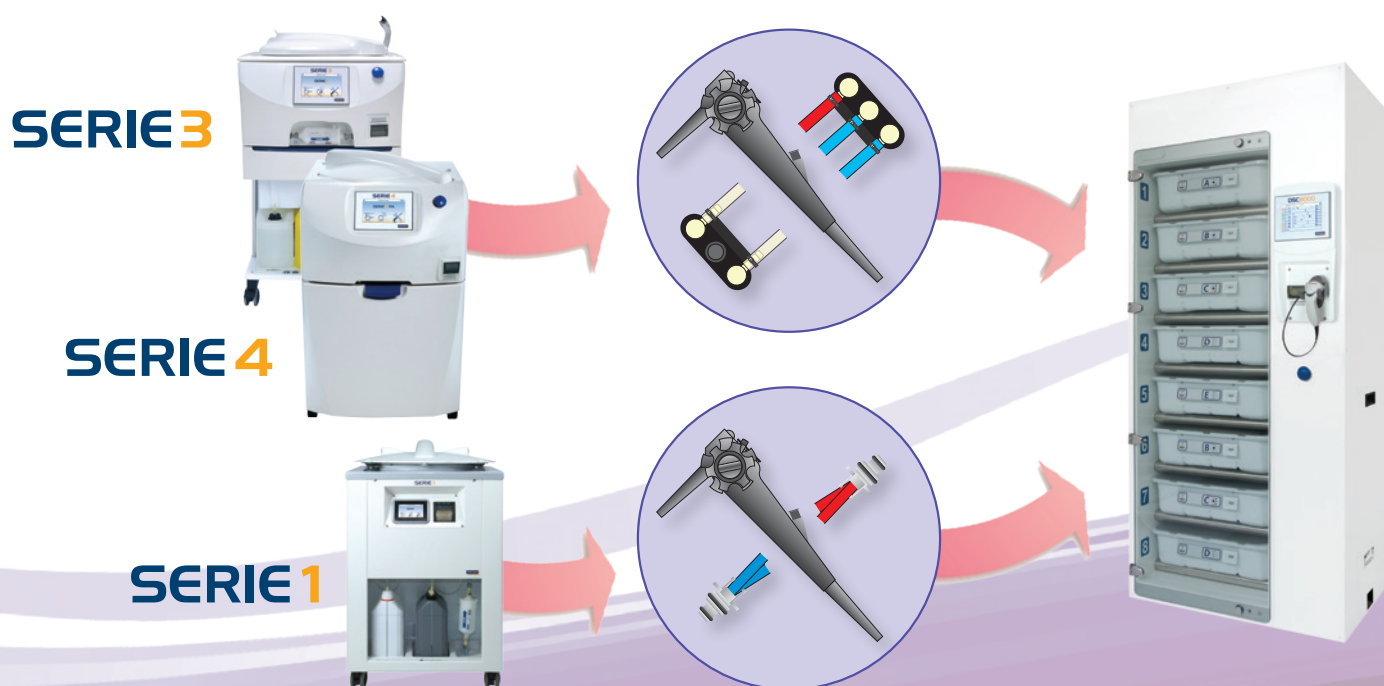

Zoptymalizuj nakład swojej pracy

OPTIMALIZACJA NAKŁADU PRACY

Twój endoskop jest zawsze gotowy do użycia, także w sytuacjach krytycznych. Interfejs DSC8000 wyświetla rzeczywisty czas przechowywania każdego endoskopu. Możliwa jest optymalizacja pracy poprzez wyznaczanie priorytetów wykorzystania endoskopów.

MONITOROWANIE

DSC8000 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez monitorowanie wszystkich parametrów funkcji w czasie rzeczywistym: podłączenia do endoskopu, ciśnienia powietrza w kanałach, zatkania filtra, awarii lamp UV-C.

STOSUJ ZŁĄCZA Z MYJNIAMI SOLUSCOPE I OSZCZĘDZAJ CZAS

Złącze podłączone jest do endoskopu podczas całego cyklu od reprocessingu do przechowywania unikając nieprawidłowych podłączeń i nadmiernych manipulacji. Od myjni Soluscope do DSC8000: tylko 1 złącze.

Szafa do Suszenia i Przechowywania endoskopów

Łatwe w użyciu urządzenie



Zapewnia pełny komfort pracy personelu

ŁATWE W UŻYCIU URZĄDZENIE

DSC8000 oferuje nowy i intuicyjny interfejs w celu łatwego użycia i szybkiego rozpoczęcia pracy. Wyjmowana taca umożliwia szybką obsługę i podłączenie endoskopu. Duże drzwi z bezpiecznego szkła zapewniają łatwy dostęp i natychmiastową identyfikację endoskopów.

PEŁNA IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Wbudowany system identyfikowania zawiera czytnik kodów kreskowych do identyfikacji endoskopów oraz operatorów, drukarkę i pamięć flash zawierającą elektroniczne etykiety. DSC8000 współpracuje z systemem zarządzania danymi IT Soluscope.

Kompleksowe rozwiązania usprawniające Twoją pracę

TRANSPORT

Soluscope Trolley (Wózek) został stworzony do transportu między myjnią endoskopów, a salą badań. Specjalna taca wyposażona jest w przezroczystą pokrywę zabezpieczającą endoskop podczas transportu. Rozwiązanie to upraszcza codzienną pracę, czyniąc ją jeszcze bardziej bezpieczną.

PRZECHOWYWANIE

Soluscope Rack (Regał) pozwala przechowywać do 10 endoskopów na ograniczonej powierzchni.

USŁUGI

Serwis po-sprzedazowy, zestawy i szkolenia zostały opracowane tak, aby mogli Państwo osiągać jak najwięcej korzyści z posiadanego urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność	8 endoskopów
Czas przechowywania	do 7 dni
Rejestracja endoskopów	do 150
Źródła zasilania	220-240V/50Hz lub 220V/60Hz
Dopływ powietrza	Wbudowana sprężarka lub powietrze medyczne / techniczne
Uzdatnianie powietrza - zewnętrzna powierzchnia endoskopu	Filtr HEPA i bakteriobójcze lampy UV-C
Uzdatnianie powietrza - kanały endoskopu	Filtr HEPA (wersja ze sprężarką) lub powietrze medyczne / techniczne
Identyfikowalność	Czytnik kodów kreskowych - Drukarka - Wymienna karta pamięci - IT Soluscope (opcjonalnie)
Wersja	Pojedyncze drzwi / Przelotowe
Wymiary (S x G x W)	90 x 64 x 202 cm (wersja ze sprężarką) 90 x 64 x 205 cm (powietrze medyczne / techniczne)
Waga	170 kg

Rozwiązania do zarządzania danymi

Szafa *DSC8000* jest kompatybilna z globalnym oprogramowaniem *IT Soluscope*, które daje Państwu dostęp do bazy danych endoskopów w czasie rzeczywistym, umożliwiając zarządzanie ich danymi.





KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA SOLUSCOPE

Soluscope proponuje kompleksowe rozwiązania do reprocesowania endoskopów giętkich.

Oferuje produkty dla każdego kroku w cyklu przygotowywania endoskopów.

Każdy z tych produktów jest certyfikowany, prosty w użyciu i wydajny tak, aby Państwa praca była łatwiejsza.



www.soluscope.com

Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France

+33 (0)4 91 83 21 22 +33 (0)4 91 83 21 10 info@soluscope.com

Produkty *Soluscope* spełniają Europejskie i międzynarodowe normy oraz posiadają oznakowania CE. Posiadając certyfikaty ISO 9001 wersja 2015 i ISO 13485 wersja 2016, *Soluscope* w sposób stały stara się spełniać rygorystyczne wymagania swoich klientów.

dystrybutor

ECOLAB

Ecolab Sp. z o.o.

ul. Opolska 114, 31-323 Kraków

pl-pl.ecolab.com/endoskopia