

**AJC**  
PRYSZNIC ŁÓŻKOWY



Dezynfekcja wody  
ozonem

Innowacyjny i wygodny system  
zapewniający higienę  
pacjentom leżącym.

# MOBILNY SYSTEM PRYSZNICOWY

Koniec z przenoszeniem pacjentów lub rezydentów do i z prysznica!



## Zalety prysznica łózkowego

- Autonomia, wydajność i szybkość opieki
- Łatwy w obsłudze, kompaktowy: szer. 80 x gł. 37 x wys. 97 cm, ergonomiczna konstrukcja
- Woda dezynfekowana ozonem (w pakiecie Privilege)
- Opróżnianie na wysokości toalety
- Kompaktowy korpus i obudowa w całości ze stali nierdzewnej (długa żywotność i 100% możliwość recyklingu)
- 10 lat gwarancji (obudowa i spawy ze stali nierdzewnej)
- Niskie zużycie wody i ograniczona ilość odpadów



## MOBILNA JEDNOSTKA

z dwoma zbiornikami na wodę o pojemności 20 litrów



## OŚWIETLENIE W FUNKCJI AKTYWNEJ

1 przycisk = 1 funkcja ułatwiająca użytkowanie i bezbłędne działanie



## USTAWIANIE TEMPERATURY

możliwe do 40°C, z kontrolą wizualną poprzez pomiar temperatury w czasie rzeczywistym



## RĘCZNA GŁOWICA PRYSZNICOWA

Jednostrumieniowa głowica prysznicowa wykonana z chromowanego tworzywa ABS, z blokadą spustu i funkcją oszczędzania wody.

## ELASTYCZNY WĄŻ 2-METROWY

dla łatwej obsługi i dostępu do różnych obszarów ciała rezydenta lub pacjenta.




Zużyta woda jest automatycznie zasysana przez pompę i odprowadzana do drugiego zbiornika (20l). Zużyta woda jest odprowadzana przez kran do zewnętrznego pojemnika lub systemu drenażowego.

# MOBILNY SYSTEM PRYSZNICOWY

## KOMPAKTOWY, ŁATWY W OBSŁUDZE I WYGODNY

Innowacyjny i wygodny system zapewniający higienę pacjentom leżącym, łączący komfort, bezpieczeństwo i wydajność.

### Pakiety prysznicowe dostosowane do potrzeb

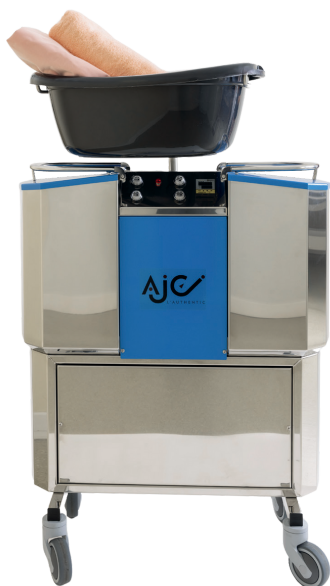

Wypożyczenie standardowe:  
2 węże ssące + 1 wąż z  
prysznicem ręcznym

|                                                                       | Pakiet Excellence | Pakiet Prestige | Pakiet Privilege |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Łóżko prysznicowe                                                     | ✓                 | ✓               | ✓                |
| 4 zaciski                                                             | ✓                 | ✓               | ✓                |
| 6 ręczników kąpielowych w kolorze łososiowym o wymiarach 150 x 190 cm | ✓                 | ✓               | ✓                |
| 6 bezszwowych pokrowców wodoodpornych antybakteryjnych M1 90 x 190 cm | ✓                 | ✓               | ✓                |
| 1 obrotowy wspornik + 2 miski                                         |                   | ✓               | ✓                |
| 1 zestaw do dezynfekcji wody ozonem                                   |                   |                 | ✓                |

Prysznic łózkowy AJC został zaprojektowany tak, aby umożliwić obłożnie chorym pensjonariuszom i pacjentom skorzystanie z prysznica bezpośrednio w łóżku, przy użyciu przenośnego systemu prysznicowego i odpowiednich akcesoriów.

### WYPOSAŻENIE



Ręcznik kąpielowy  
150x190 cm



Prześcieradło jednorazowe  
T90 i T120



Pokrowiec ochronny  
T90 i T120



Wspornik z 2 miskami



Ozonator wody  
Zestaw do dezynfekcji



Zaciski sprężynowe  
FZH40, FZ60, MT70

## Prysznic w łóżku: korzyści dla pacjentów i opiekunów

### • KOMFORT I GODNOŚĆ

Pacjenci mogą być kąpieni bez opuszczania swojego otoczenia, co zmniejsza stres i dyskomfort związany z przemieszczaniem się, przy jednoczesnym zachowaniu ich godności. Personel nie musi już przenosić pacjenta, a obsługa jest ograniczona.

### • ZMNIJSZONE RYZYKO UPADKÓW

Pacjenci przykuci do łóżka lub o ograniczonej ruchomości często są narażeni na upadek podczas przenoszenia do łazienki. Prysznic w łóżku eliminuje to ryzyko.

### • OPIEKA PERSONALIZOWANA

Opiekunowie mogą dostosować procedurę do konkretnych potrzeb pacjenta, zapewniając mu bardziej spersonalizowaną opiekę.

### • ZAPOBIEGANIE ODLEŻYŃOM

Regularna i odpowiednia higiena może pomóc w zapobieganiu powstawaniu odleżyn.

### • ADAPTACYJNOŚĆ

Prysznic w łóżku można wykonać w dowolnym momencie, bez konieczności przenoszenia pacjenta do innego pokoju, co jest szczególnie przydatne w przypadku nagłych lub nieprzewidzianych potrzeb.

Prysznic łóżkowy AJC poprawia komfort, bezpieczeństwo i higienę pacjentów leżących.

## Protokół użytkowania i dezynfekcji (obowiązkowe 5 min)

1. Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
2. Wymień wąż ssący; zamocz brudny wąż (po wyjęciu filtra) w roztworze środka dezynfekującego.
3. Wyczyść rączkę prysznica i wąż szmatką nasączoną roztworem detergentu.
4. Wypłucz brudny zbiornik, spryskaj go detergentem/roztworem dezynfekującym i wytrzyj do sucha szmatką.

### Dzięki opcji dezynfekcji wody ozonowanej:

- Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby aktywować generator ozonu; ozon miesza się z pozostałą wodą. W razie potrzeby dodaj wody do zbiornika z czystą wodą.
- Użyj prysznica ręcznego, aby wyczyścić i zdezynfekować zbiornik brudnej wody.
- Opróżnij zbiornik na brudną wodę.



Dezynfekcja  
Higiena szpitalna  
Sterylizacja  
Ochrona indywidualna  
Sterylny woreczki  
Pralnictwo  
Urządzenia chłodnicze

