




WHIRL-PAK®
Filtration Group



STANDARDOWE WORECZKI

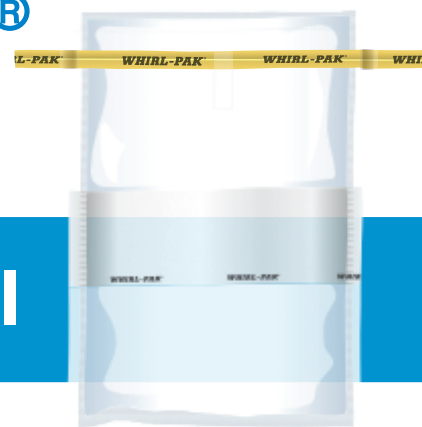

UCHWYTY DO OTWIERANIA



- Dla łatwego otwierania
- Antypoślizgowy materiał Tyvek®

WYGODNY PASEK DO OPISYWANIA



- Szybkie i łatwe etykietowanie
- Wyraźna identyfikacja próbki
- Organizacja i identyfikowalność

CIĄGŁY ZGRZEW OBWODOWY



- Maksymalna ochrona przed wyciekami na całym obwodzie



STERYLIZACJA PO PRODUKCJI

- Zwiększona integralność próbki
- Perforowane zamknięcie utrzymujące sterylność



NIEZAWODNE, ODPORNE NA PRZEBICIE ZAMKNIĘCIA

- Taśma wystaje poza drut, eliminując ostre końce
- Druty utrzymują górę otwartą dla łatwego dostępu
- Szczelne zamknięcie gwarantujące integralność próbki



CZYSTA FOLIA POLIETYLENOWA

- Wyjątkowa przezroczystość i najwyższa wytrzymałość
- Dopuszczona przez FDA do kontaktu z żywnością

Najwyższa jakość z gwarancją aseptycznego pobierania próbek

Uznawane w wielu branżach, woreczki te wyznaczają złoty standard dla bezpiecznego i niezawodnego przenoszenia próbek. Dzięki innowacyjnemu zintegrowanemu zamknięciu gwarantują najwyższą ochronę podczas wysyłki i przechowywania różnych materiałów do badań.

Doświadcz pełni zaufania dzięki Standardowym Sterylizowanym Woreczkom do Pobierania. Próbek Whirl-Pak®, zaprojektowanym tak, by stanowić wolny od zanieczyszczeń, elastyczny pojemnik na Twoje cenne próbki. Możesz być spokojny, że wyniki Twoich analiz pozostaną wiarygodne i dokładne, dzięki bezkonkurencyjnej jakości naszych produktów. Wolne od DNaz, pirogenów i BPH oraz zgodne z wymaganiami regulacyjnymi: USDA, FDA, EPA, HACCP.

Sterylizowane woreczki do pobierania próbek Whirl-Pak® są wolne od enzymów R-Nase, D-Nase, pirogenów i BPH oraz spełniają wymagania regulacyjne i branżowe:



STANDARDOWE STERYLNE WORECZKI DO PRÓBEK WHIRL-PAK

NR KAT.	TYP DRUTU	POJEMNOŚĆ (FL OZ)	POJEMNOŚĆ (ML)	ROZMIAR (CALE)	ROZMIAR (CM)	GRUBOŚĆ FOLII (MILS)	ILOŚĆ W OPAK. (SZT.)	ZAKRES TEMP. MIN/MAX°F
WORECZKI STANDARDOWE WHIRL-PAK: Gładkie, ze sterylnym zamknięciem								
B01009	Okrągły	2 Fl oz.	59 mL	3" W x 5" L	7.5 x 12.5 cm	2.25 mils	500	-346° / +180°
B00679	Okrągły	4 Fl oz.	118 mL	3" W x 7 1/4" L	7.5 x 18.5 cm	2.25 mils	500	-346° / +180°
B00992	Okrągły	7 Fl oz.	207 mL	3 3/4" W x 7" L	9.5 x 18 cm	3 mils	500	-346° / +180°
B01018	Okrągły	13 Fl oz.	384 mL	5 1/4" W x 7 1/2" L	13 x 19 cm	3 mils	500	-346° / +180°
B00736	Okrągły	18 Fl oz.	532 mL	4 1/2" W x 9" L	11.5 x 23 cm	2.5 mils	500	-346° / +180°
B01020	Okrągły	24 Fl oz.	710 mL	6" W x 9" L	15 x 23 cm	3 mils	500	-346° / +180°
B01063	Okrągły	24 Fl oz.	710 mL	6" W x 9" L	15 x 23 cm	4 mils	500	-346° / +180°
B00990	Okrągły	27 Fl oz.	798 mL	5" W x 12" L	12.5 x 30.5 cm	3 mils	500	-346° / +180°
B00994	Okrągły	36 Fl oz.	1,065 mL	5" W x 15" L	12.5 x 38 cm	3 mils	500	-346° / +180°
B01027	Okrągły	42 Fl oz.	1,242 mL	6" W x 15" L	15 x 38 cm	3 mils	500	-346° / +180°
B01532	Okrągły	55 Fl oz.	1,627 mL	7 1/2" W x 12" L	19 x 30 cm	3 mils	500	-346° / +180°
B01323	Okrągły	69 Fl oz.	2,041 mL	7 1/2" W x 15" L	19 x 38 cm	3 mils	500	-346° / +180°



WHIRL-PAK®
Filtration Group

CIAŁA STAŁE LUB CIECZE - SZCZELNE ZAMKNIĘCIE

KROK 1



Oznacz swoją próbkę, jeśli używasz woreczka z polem do opisywania.

KROK 2



Aby otworzyć, oderwij górną część wzdłuż perforacji.

KROK 3



Użyj uchwytów Tyvek®, aby otworzyć bez ryzyka zanieczyszczenia

KROK 4



Umieść próbkę w woreczku. Rozwiązanie idealne do cieczy i ciał stałych.

KROK 5A



Chwyć woreczek za uchwyty i zakręć (zwiń) 3 do 4 razy, aby utworzyć uszczelnienie.

KROK 5B



Albo złóż górną krawędź ciasno 3 do 4 razy, aby ją dokładnie zamknąć.

KROK 6A



Zabezpiecz zamknięcie, zagnij końce drutów na zewnątrz

KROK 6B



Albo połącz dwa końce drutów, aby je skręcić, zawiązać i schować!



whirl-pak.com



+1.920.568.5616



contact@whirl-pak.com

 **greenpol dystrybutor**

Instytut Kształtowania Środowiska

Sp. z o.o., +48 790 329 925

centrala@greenpol.pl, greenpol.pl